

364

中华人民共和国国家标准

GB/T 17257.1—2009/ISO 8669-1:1988
代替 GB/T 17257.1—1998

集尿袋 第1部分:术语

Urine collection bags—Part 1: Vocabulary

(ISO 8669-1:1988, IDT)

2009-03-16 发布

2009-09-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

GB/T 17257《集尿袋》分为二个部分：

——第1部分：术语

——第2部分：要求和检验方法

本部分为 GB/T 17257 的第1部分。

本部分等同采用 ISO 8669-1:1988《集尿袋 第1部分：术语》(英文版)。

本部分代替 GB/T 17257.1—1998《集尿袋 第1部分：术语》

本部分与 GB/T 17257.1—1998 相比变化如下：

——删除了 GB/T 17257.1—1998 中的 2.23；

——补充了第1章范围；

——修订了 2.1、2.3、2.4、2.7、2.8。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本部分起草单位：国家康复器械质量监督检验中心、中国康复研究中心、北京红祥聚科贸有限公司。

本部分主要起草人：贾亚玲、史文博、张红涛、蔡志强。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17257.1—1998。

集尿袋 第1部分:术语

1 范围

GB/T 17257 的本部分定义的术语仅适用于集尿袋的国家标准,相关医学术语不予定义。

本部分的术语无论单独或联合使用,都不作为规定或推荐某种产品的特殊设计、式样和规格。

注:如果一个术语有一个或多个认可的同义词,则按应用情况排列;不推荐的同义词用“不推荐”表示。术语按英文字母顺序检索。

2 术语和定义

2.1

贮尿袋 **urine collection bag**

贮存尿液的软性袋,并由戴在身上的另一器具(例如:导尿管)收集。

2.2

集尿袋总成(集尿袋) **urine collection bag assembly**

保证贮尿袋正常使用的所有组件和附件。

2.3

导入管 **inlet tubing**

尿液流入贮尿袋的导管,是集尿袋的一部分。

2.4

排出管 **outlet tubing**

尿液流出贮尿袋的导管,是集尿袋的一部分。

2.5

排出管止流夹 **outlet tubing restraint**

排出管的关闭装置。

2.6

滴尿腔 **urine drip chamber**

满足下列要求的腔体:

- a) 使尿液间断流动,并降低微生物沿导入管向上运动;
- b) 便于观察尿液流动。

2.7

连接头 **connector**

连接尿流通路中两个或多个部件的器件。

2.8

适配接头 **adaptor**

连接不同式样或不同尺寸的尿流通路中两个或多个部件的连接头。

2.9

接头帽 **cap**

连接头或适配接头上的遮盖物。

2.10

通气口 **air vent**

使贮尿袋中的压力与外部大气压相等的装置。

2.11

排放开关 drainage tap

使贮尿袋中排空和再关闭的装置。

2.12

单向(止回)阀 non-return valve

防回流阀(不推荐) anti-reflux valve (deprecated)

阻止尿液回流的装置。

2.13

刻度 graduation or scale

在贮尿袋上表示大概容量的标记。

2.14

采样点 sampling site

允许在无菌情况下提取尿样并可重新密封的区域。

2.15

撕裂口 tear site

利于撕裂贮尿袋、以便排空的豁口。

2.16

联结点 attachment point

将贮尿袋联结在固定装置上的孔或突出部件。

2.17

固定装置 fastening device

使贮尿袋能固定在身体、轮椅、床上等地方的部件。

2.18

床挂钩 bed hanger

床旁悬挂贮尿袋的装置。

2.19

腿带 leg strap

围绕在腿部,固定贮尿袋的装置。

2.20

腰带 waist strap

围绕在腰部,固定贮尿袋的装置。

2.21

支撑袋 pocket support

容纳贮尿袋的固定装置。

注:支撑袋通常是由布制做。

2.22

落地架 floor stand

立在地板上悬挂集尿袋的可移动装置。

中 文 索 引

C		连接头.....	2.7
采样点		落地架	2.22
床挂钩		P	
D		排出管.....	2.4
单向(止回)阀/防回流阀(不推荐).....		排出管止流夹.....	2.5
导入管.....		排放开关	2.11
滴液腔.....		S	
G		适配接头.....	2.8
固定装置		撕裂口	2.15
J		T	
集尿袋总成(集尿袋).....		通气口	2.10
接头帽.....		腿带	2.19
K		Y	
刻度		腰带	2.20
L		Z	
联结点		支撑袋	2.21
		贮尿袋.....	2.1

英文索引

A

adaptor	2. 8
air vent	2. 10
attachment point	2. 16

B

bed hanger	2. 18
------------------	-------

C

cap	2. 9
connector	2. 7

D

drainage tap	2. 11
--------------------	-------

F

fastening device	2. 17
------------------------	-------

G

graduation/ scale	2. 13
-------------------------	-------

I

inlet tubing	2. 3
--------------------	------

L

leg strap	2. 19
-----------------	-------

N

non-return valve/anti-reflux valve(deprecated)	2. 12
--	-------

O

outlet tubing	2. 4
outlet tubing restraint	2. 5

P

pocket support	2. 21
----------------------	-------

S

sampling site	2. 14
---------------------	-------

T

tear site	2. 15
-----------------	-------

U

urine collection bag	2. 1
urine collection bag assembly	2. 2
urine drip chamber	2. 6

W

waist strap	2. 20
-------------------	-------

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

集尿袋 第1部分:术语

GB/T 17257.1—2009/ISO 8669-1:1988

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548


中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 10 千字
2009年5月第一版 2009年5月第一次印刷

*

书号: 155066·1-37069 定价 16.00 元

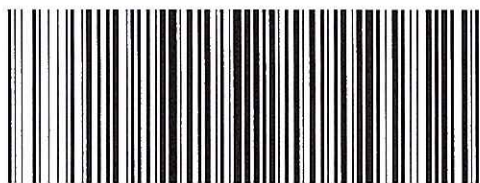

GB/T 17257.1-2009

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533